


ワンドイリゲーター 取扱説明書

Wand Irrigator

一般的名称：洗浄器キット 販売名：ワンドイリゲーター 一般医療機器 届出番号：13B1X00053P00024

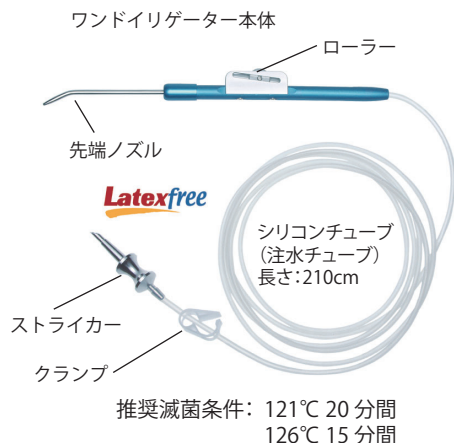

洗浄用ブラシ
太・中・細

ワンド内部、ワンド先端ノズル、
ストライカー等の洗浄に使用

細：先端ノズル部
中：ストライカー等
太：ワンドハンドル部等

本品は使用前に必ず洗浄・滅菌してください。※ プレッシャーカフ～ゴム球は滅菌不可となります。

1



生理食塩水または
滅菌水の500cc バッグを
プレッシャーカフに入れます。




プレッシャーカフのフックに
水バッグを掛けます。

2



カットオフクランプで
注水チューブを閉じます。

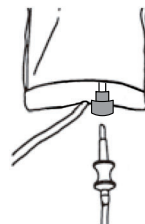

生理食塩水もしくは滅菌水の
バッグに注水チューブ先端の
ストライカーを差し込みます。


3 次の方法でプレッシャーカフに空気を送り、加圧します。

空気抜き弁の方向

1. 空気抜き弁を閉じます。
※右記参照

2. 希望する圧力になるまでゴム球で加圧します。
※加圧しすぎるとプレッシャーカフが破損する恐れがあります。


※付属の圧力ゲージはあくまでも目安です。プレッシャーカフの状態を確認しながら加圧してください。

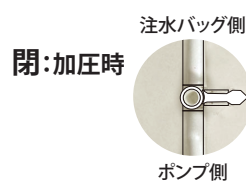

4

注水チューブをハンドル後方から差し入れ、
ローラー下を通し、先端ノズルの差し込み部に取り付けて
ワンドを元の形状にもどします。

手順 2 のクランプを外し注水チューブを開放します。
ハンドルのローラーを使用して、注水の開始・停止、
および注水量の調整をします。

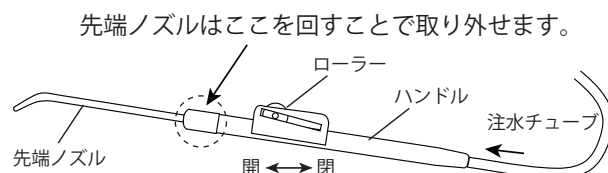

別売品
040-24002 ワンドイリゲーター交換用チューブ 3,200円

使用後は必ずよく洗浄して保管してください。



株式会社 インプラテックス

いつも、とくに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00～17:00にお願いいたします。