

DLCコーティングを施した インプラント手術用 ツイストブラックドリル

※DLCとはDiamond Like Carbonの略です。
ダイヤモンドに類似した性質をもつナノレベルの硬質膜を金属表面にコーティングする技術で、
圧倒的な低摩擦性、耐凝着性、低攻撃性を示し、数ある表面処理技術の中でもかなり高い技術として認知されています。


ブラックドリルの特性

- ・DLCコーティングにより耐摩耗性、耐久性、耐食性を向上。
- ・通常のドリルに比べ超高硬度で、約5倍の硬さと約1/4の摩擦係数(メーカー従来比)
- ・黒色が光を吸収するため高い視認性。
- ・切れ味を保ちつつ耐久度が高いため、コストパフォーマンスも向上。
- ・穿孔深さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属。(裏面のガイドドリルを除く)
- ・ステンレス鋼製 CAシャンク、オートクレープ可。

ツイストドリルブラック/ショート

標準価格:12,800円(税別)

ストッパー付

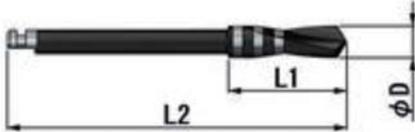

穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。
ストッパーの調節範囲は、6~11mmです。
マーキング位置:刃部先端から、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm
※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22200	ツイストドリルブラック2.0S	φ 2.0	11.5mm	33mm	
310-22260	ツイストドリルブラック2.6S	φ 2.6	11.5mm	33mm	
310-22280	ツイストドリルブラック2.8S	φ 2.8	11.5mm	33mm	
310-22290	ツイストドリルブラック2.9S	φ 2.9	11.5mm	33mm	
310-22300	ツイストドリルブラック3.0S	φ 3.0	11.5mm	33mm	
310-22310	ツイストドリルブラック3.1S	φ 3.1	11.5mm	33mm	
310-22320	ツイストドリルブラック3.2S	φ 3.2	11.5mm	33mm	
310-22330	ツイストドリルブラック3.3S	φ 3.3	11.5mm	33mm	
310-22340	ツイストドリルブラック3.4S	φ 3.4	11.5mm	33mm	
310-22350	ツイストドリルブラック3.5S	φ 3.5	11.5mm	33mm	
310-22360	ツイストドリルブラック3.6S	φ 3.6	11.5mm	33mm	
310-22370	ツイストドリルブラック3.7S	φ 3.7	11.5mm	33mm	
310-22380	ツイストドリルブラック3.8S	φ 3.8	11.5mm	33mm	
310-22400	ツイストドリルブラック4.0S	φ 4.0	11.5mm	33mm	
310-22420	ツイストドリルブラック4.2S	φ 4.2	11.5mm	33mm	
310-22450	ツイストドリルブラック4.5S	φ 4.5	11.5mm	33mm	

ツイストドリルブラック/ロング

標準価格:12,800円(税別)

ストッパー付



穿孔長さを設定できる可動式ストッパーと専用レンチが付属しています。
ストッパーの調節範囲は、11~16mmです。
マーキング位置:刃部先端から11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm
※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-22201	ツイストドリルブラック2.0L	φ 2.0	16.5mm	38mm	
310-22281	ツイストドリルブラック2.8L	φ 2.8	16.5mm	38mm	
310-22311	ツイストドリルブラック3.1L	φ 3.1	16.5mm	38mm	
310-22321	ツイストドリルブラック3.2L	φ 3.2	16.5mm	38mm	
310-22331	ツイストドリルブラック3.3L	φ 3.3	16.5mm	38mm	
310-22351	ツイストドリルブラック3.5L	φ 3.5	16.5mm	38mm	
310-22381	ツイストドリルブラック3.8L	φ 3.8	16.5mm	38mm	

ガイド用ツイストドリル ブラック

標準価格:12,800円(税別)



10mmのサージカルガイド使用時に、7mm・8.5mm・10mmの深さに穴が開くようにマーキングされています。

マーキング位置:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm

※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD1)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-23001	φ2ガイド用ツイストドリルブラック	φ2.0	22mm	36mm	
310-23002	φ3ガイド用ツイストドリルブラック	φ3.0	22mm	36mm	

ガイド用段付きドリル ブラック

標準価格:12,800円(税別)



ドリルステップの省略を可能にしました。

テーパタイプインプラントの下穴に最適です。

マーキング位置:刃部先端から、17mm、18.5mm、20mm、20.5mm

※外部注水式。十分に生理食塩水をかけてドリルを冷却しながらご使用ください。

商品コード	商品名	刃部外径(φD1)	刃部外径(φD2)	刃部長さ(L1)	全長(L2)	商品写真
310-24024	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.4/2.8	φ2.4	φ2.8	22mm	36mm	
310-24028	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ2.8/3.2	φ2.8	φ3.2	22mm	36mm	
310-24032	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.2/3.6	φ3.2	φ3.6	22mm	36mm	
310-24038	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ3.8/4.2	φ3.8	φ4.2	22mm	36mm	
310-24042	ガイド用段付ツイストドリルブラック φ4.2/4.6	φ4.2	φ4.6	22mm	36mm	

注文書

電話
番号

FAX
番号

※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

診療所名

ご芳名

ご住所 〒

都道
府県

市区
郡

商品コード	商品名	注文数

認証番号:21900BZX00409000

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。 <http://www.itx.co.jp>

発売元



〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

- 歯科器具
- インプラント材料
- セミナー

Facebook
はじめました。



インプラテックス

検索

製造販売元



株式会社 デンテック

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問い合わせください。

2017-04