

## ピエゾサージェリー® インサートチップ カタログ

100種を超える豊富な選択肢

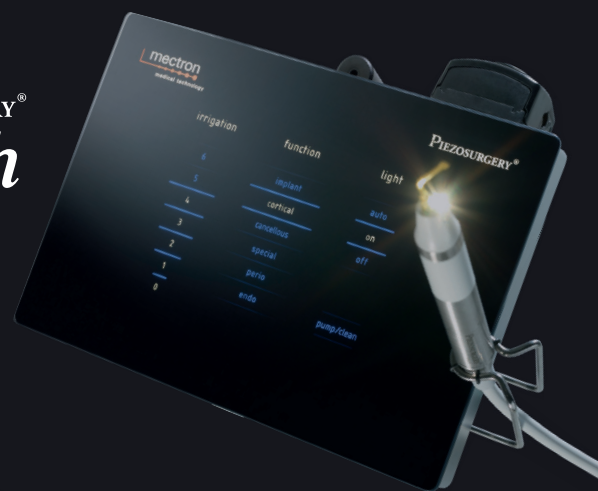


多くの先生方にご支持いただいている  
弊社販売実績上位のインサートチップ

- 骨切除 OT1 OT5 OT5A OT6  
OT7 OT7A OT7S-3 OT7S-4  
OT7-20 OT8L OT8R OT9  
OT12 OT12S OT14
- 骨形成 OP1 OP3
- 抜歯 EX1
- エンド逆根管形成 EN1
- インプラント窩マーキング IM1-SP
- 支台歯形成 TA14D90 TA14D60  
TA12D90 TA12D60
- インプラント起始点 IM1-SP

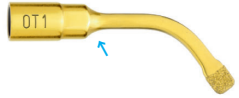
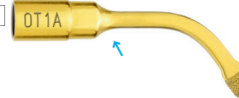
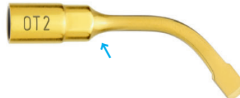
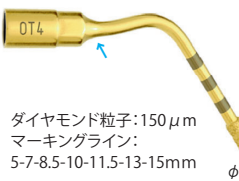

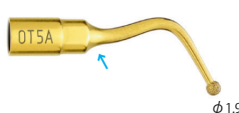
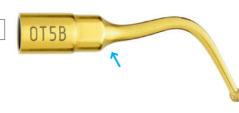
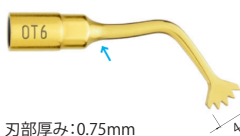


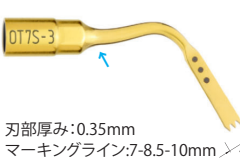
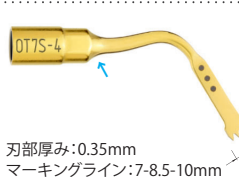

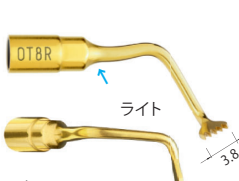
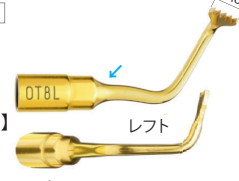
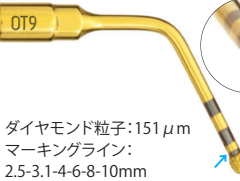

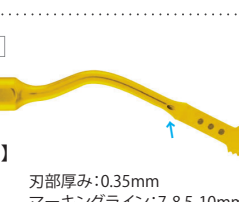
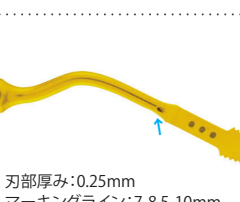
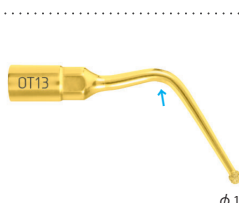
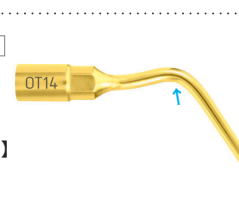
※本カタログ内で★のついた製品となります。

PIEZOSURGERY®  
*touch*



PIEZOSURGERY®  
*white*

# 骨切り・骨形成術

<p>商品コード 140-10010</p> <p><b>OT1</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:91μm 先端厚み:0.8mm</p> 	<p>商品コード 140-10011</p> <p><b>OT1A</b></p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:126μm 先端厚み:1mm</p> 	<p>商品コード 140-10020</p> <p><b>OT2</b></p> <p>16,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> 
<p>商品コード 140-10040</p> <p><b>OT4</b></p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:150μm マーキングライン: 5-7-8.5-10-11.5-13-15mm</p> 	<p>商品コード 140-10050</p> <p><b>OT5</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:91μm 形状:PL1と同じ</p> 	
<p>商品コード 140-10051</p> <p><b>OT5A</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:91μm</p> 	<p>商品コード 140-10052</p> <p><b>OT5B</b></p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:126μm</p> 	<p>商品コード 140-10060</p> <p><b>OT6</b> ★</p> <p>16,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>刃部厚み:0.75mm</p> 
<p>商品コード 140-10070</p> <p><b>OT7</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>刃部長さ:10mm 刃部厚み:0.55mm マーキングライン:7-8.5-10mm</p> 	<p>商品コード 140-10071</p> <p><b>OT7A</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>刃部厚み:0.75mm マーキングライン: 7-8.5-10mm</p> 	<p>商品コード 140-10072</p> <p><b>OT7S-3</b></p> <p>23,000円</p> <p>【special】</p> <p>刃部厚み:0.35mm マーキングライン:7-8.5-10mm</p> 
<p>商品コード 140-10073</p> <p><b>OT7S-4</b> ★</p> <p>23,000円</p> <p>【special】</p> <p>刃部厚み:0.35mm マーキングライン:7-8.5-10mm</p> 	<p>商品コード 140-10074</p> <p><b>OT7-20</b> ★</p> <p>29,800円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>刃部長さ:19mm 刃部厚み:0.6mm マーキングライン: 7-9-11-13-15-17-19mm</p> <p>※ハンドピースへの装着は「ダイナモレンチK8」を使用</p> 	
<p>商品コード 140-10080</p> <p><b>OT8R</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ライト</p> <p>刃部厚み0.6mm</p> 	<p>商品コード 140-10081</p> <p><b>OT8L</b> ★</p> <p>22,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>レフト</p> <p>刃部厚み:0.6mm</p> 	<p>商品コード 140-10090</p> <p><b>OT9</b> ★</p> <p>28,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:151μm マーキングライン: 2.5-3.1-4-6-8-10mm 形状:PL2と同じ</p> 
<p>商品コード 140-10100</p> <p><b>OT11</b></p> <p>28,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:151μm 形状:PL3と同じ</p> 	<p>商品コード 140-10101</p> <p><b>OT12</b> ★</p> <p>27,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>刃部厚み:0.35mm マーキングライン:7-8.5-10mm</p> 	<p>商品コード 140-10102</p> <p><b>OT12S</b> ★</p> <p>27,000円</p> <p>【special】</p> <p>刃部厚み:0.25mm マーキングライン:7-8.5-10mm</p> 
<p>商品コード 140-10103</p> <p><b>OT13</b></p> <p>28,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:150μm</p> 	<p>商品コード 140-10104</p> <p><b>OT14</b> ★</p> <p>28,000円</p> <p>【cancellous/cortical】</p> <p>ダイヤモンド粒子:150μm</p> 	

QRコードからインサートチップのモード設定一覧表をご覧いただけます。



## 歯周外科・歯冠延長術用チップ ラウンド型、ダイヤモンドコーティングチップ

頬舌側の皮質骨形成に使用。  
コントロールしやすく効果的な骨形成が可能。

商品コード 140-18018

### リセクティブペリオキット

133,000円

頬舌側の皮質骨形成



図1 骨形成前 図2 骨形成術 図3 骨形成術後 図4 頬舌側の皮質骨を形成 図5 アクセスしにくい部位に使用



OT13 OT14  
使用チップ



キット構成  
OT13、OT14  
OP8、OP9、OP5A、ホルダー

QRコードにて術式動画をご覧いただけます。





## NEWピエゾリフトテクニック

商品コード 140-15700

**PL1**  
22,000円

ダイヤモンド粒子91μm  
形状:OT5と同じ

[cancellous/cortical]

上顎洞底骨まで到達  
ポーリングの安全な除去用

商品コード 140-15710

**PL2**  
28,000円

ダイヤモンド粒子150μm  
形状:OT9と同じ

[cancellous/cortical]

上顎洞底骨の開通  
膜の最初の剥離用

商品コード 140-15720

**PL3**  
28,000円

ダイヤモンド粒子151μm  
形状:OT11と同じ

[cancellous/cortical]

上顎洞底骨への窩洞形成  
上顎洞底膜の剥離〜拳上用

### NEWピエゾリフトテクニック用チップ

- ・マーキングラインが付与され深度コントロールが容易です。
- ・適用する上顎洞底骨の厚さは、2～5mmです。
- ・上顎洞底膜認識のためプローブによる探査と、  
下図3、4でのバルサルバ法による確認をお奨めします。
- ・必要に応じてX線撮影による確認（推奨は上顎洞へ到達後）
- ・【注水量の設定】OT5・OT9：レベル2、OT11：レベル1

使用チップ



オプション  
下穴形成  
に使用

商品コード 140-18016

**ピエゾリフトキット**  
75,000円

キット構成  
PL1  
PL2  
PL3  
ホルダー



QRコードから  
術式動画を  
ご覧いただけます。



### 水流を用いて上顎洞底膜を剥離するテクニック

- 1 必要に応じてIM2Pで下穴を形成。  
PL1で上顎洞底骨付近まで穿孔。
- 2 必要に応じてP2-3で下穴を形成。  
PL3で洞底骨付近までφ3mmの骨孔を形成。
- 3 PL2 上顎洞底骨を開通させる。
- 4 アプリケーターで、骨補填材を填入する。  
PL3 填入された骨補填材を押し込む。
- 5 PL3 骨補填材を、チップ先端からの水流で流し込む。
- 6 PL1 洞底骨（ポーリング）を削除。
- 7 PL3 必要量の骨補填材が洞底内に填入されるまで、4～5の操作を繰り返す。
- 8 通法に従いインプラントを埋入。

## サイナスリフトラテラルアプローチ

商品コード 140-15800

**SLC**  
18,000円

[cancellous/cortical]

商品コード 140-15810

**SLO-H**  
22,000円

[cancellous/cortical]

商品コード 140-15820

**SLS**  
13,000円

[special]

商品コード 140-15830

**SLE1**  
19,000円

[special]

商品コード 140-15840

**SLE2**  
19,000円

[special]

### サイナスリフトラテラルアプローチ用チップ

開窓部周辺だけでなく、  
深部の剥離拡大が行えます。



商品コード 140-18017

**サイナスリフトラテラルキット**  
90,000円

キット構成  
SLC、SLO-H  
SLS、SLE1  
SLE2、ホルダー



QRコードから  
術式動画を  
ご覧いただけます。




### サイナスリフトラテラルアプローチテクニック

- 1 SLC 上顎開窓部骨壁を骨形成。
- 2 SLO-H 開窓部の骨切りを行う。
- 3 SLO-H 開窓部骨 外科用鉗子で、開窓部骨を除去。
- 4 SLS 開窓部周辺の上顎洞底粘膜を剥離。
- 5 SLE1 上顎洞底骨から上顎洞底粘膜を剥離〜拳上。
- 6 SLE2 口蓋側の骨壁から上顎洞底粘膜を剥離〜拳上。
- 7 骨移植材を填入しメンブレンを設置。

## 粘膜剥離

商品コード 140-10210

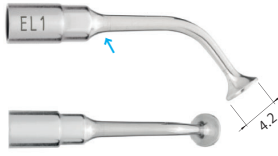
**EL1**  
12,000円



【endo】

商品コード 140-10220

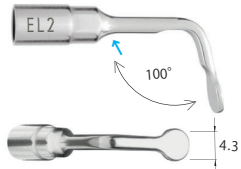
**EL2**  
12,000円



【endo】

商品コード 140-10230

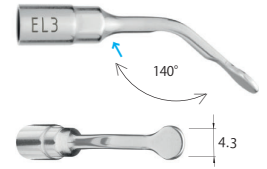**EL3**  
12,000円




【endo】

## エンド逆根管形成

商品コード 140-15410

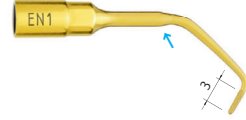**EN1**★  
22,000円




ダイヤモンド粒子30µm

【endo】

商品コード 140-15420

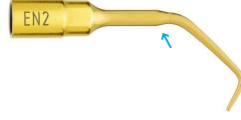**EN2**  
12,000円




ダイヤモンドコーティングなし  
形状はEN1と同じ

【endo】

商品コード 140-15430

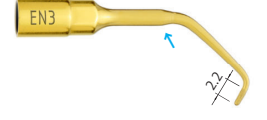**EN3**  
22,000円




ダイヤモンド粒子30µm

【endo】

商品コード 140-15440

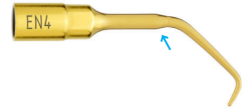**EN4**  
12,000円




ダイヤモンドコーティングなし  
形状: EN3と同じ

【endo】

商品コード 140-15450

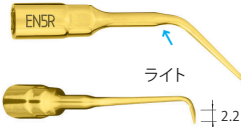**EN5R**  
23,000円




ダイヤモンド粒子30µm

【endo】

商品コード 140-15451

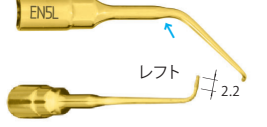**EN5L**  
23,000円




ダイヤモンド粒子30µm

【endo】

商品コード 140-15460

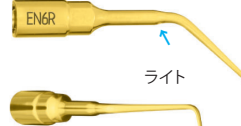**EN6R**  
12,000円




ダイヤモンドコーティングなし  
形状はEN5Rと同じ

【endo】

商品コード 140-15461

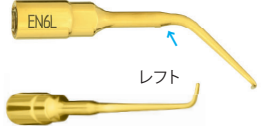**EN6L**  
12,000円



ダイヤモンドコーティングなし  
形状はEN5Lと同じ

【endo】


QRコードから  
インサートチップの  
モード設定一覧表を  
ご覧いただけます。



## 骨膜剥離

商品コード 140-15610

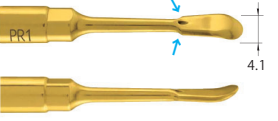
**PR1**  
18,500円



【cancellous/cortical】

商品コード 140-15620

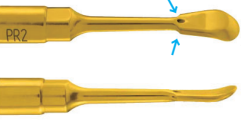**PR2**  
18,500円



【cancellous/cortical】

商品コード 140-15930

**EXL3**  
23,000円




【cortical】

## 抜歯用

商品コード 140-10410

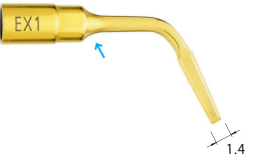
**EX1**★  
16,000円



【cancellous/cortical】

商品コード 140-10420

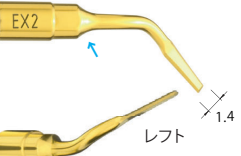
**EX2**  
16,000円



【cancellous/cortical】

商品コード 140-10430

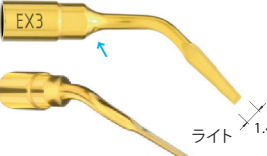**EX3**  
16,000円



【cancellous/cortical】

## インプラント除去

商品コード 140-10610

**EXP3-R**  
26,000円




マーキングライン:  
5.5-7-8.5-10-11.5mm

【special/cancellous/cortical】

商品コード 140-10620

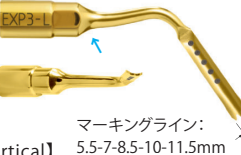**EXP3-L**  
26,000円



マーキングライン:  
5.5-7-8.5-10-11.5mm

【special/cancellous/cortical】

商品コード 140-10630

**EXP4-R**  
26,000円



マーキングライン:  
5.5-7-8.5-10-11.5mm

【special/cancellous/cortical】

商品コード 140-10640

**EXP4-L**  
26,000円



マーキングライン:  
5.5-7-8.5-10-11.5mm

【special/cancellous/cortical】

商品コード 140-18012

**エキスプランテーションキット**  
96,000円



キット構成

EXP3-R、EXP3-L、EXP4-R、EXP4-L、ホルダー

- ・先端が円弧状にカーブし、インプラント側面に沿う形状です。
- ・可能な限り無駄のない骨切りによってインプラント除去を行い、歯槽骨を保存しますので、インプラントの再埋入にも有利です。
- ・インプラント除去の処置は左右両側を駆使するため、初期導入には本キットをお奨めいたします。

## インプラントメンテナンス

商品コード 140-17040

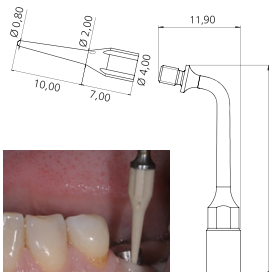
**IPクリーニングキット**  
22,000円



【endo/perio】

キット構成  
ICP×1本  
IC1×5本

- ・インプラント表面に傷が付きにくい。
- ・白歯部へアクセスが容易。
- ・滅菌し再使用可能。(消耗後、交換必要)
- ・インプラントの他、金属/セラミック材料の補綴物、天然歯に使用可能。



商品コード 140-17020

**チップホルダー ICP**  
14,000円



商品コード 140-17030

**IPクリーニングチップ IC1 (5入)**  
16,000円



PEEK製(ポリエーテルエーテルケトン)  
先端径: φ0.8mm

# インプラント窩形成

商品コード 140-15311

**IM1S**  
24,000円

ダイヤモンド粒子30 $\mu$ m  
マーキングライン:  
4-5.5-7-8.5-10mm

商品コード 140-15320

**IM1-AL**  
21,000円

ダイヤモンド粒子30 $\mu$ m

商品コード 140-15340

**IM2A**  
37,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15341

**IM2A-15**  
37,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15350

**IM2P**  
37,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15351

**IM2P-15**  
37,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15353

**IM2.8A**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15354

**IM2.8P**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15360

**IM3A**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15361

**IM3A-15**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15370

**IM3P**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15371

**IM3P-15**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15372

**IM3.4A**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15373

**IM3.4P**  
39,000円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15.5mm

商品コード 140-15380

**IM4A**  
39,800円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-15390

**IM4P**  
39,800円

マーキングライン:  
7-8.5-10-11.5-13-15mm

商品コード 140-11021

**P2-3**  
25,900円

ダイヤモンド粒子150 $\mu$ m  
形状:P2-3SPと同じ

商品コード 140-11031

**P3-4**  
25,900円

ダイヤモンド粒子150 $\mu$ m

## サインスフィジオリフト用

商品コード 140-15330

**IM1-SP**  
21,000円

ダイヤモンド粒子30 $\mu$ m  
マーキングライン:  
2.5-3.1-4-6-8-10mm

商品コード 140-15352

**IM2-SP (在庫限り)**  
37,000円

マーキングライン:  
2.5-3.1-4-6-8-10mm  
形状:IM2Pと同じ

商品コード 140-11022

**P2-3SP (在庫限り)**  
25,900円

ダイヤモンド粒子150 $\mu$ m  
マーキングライン:  
2.5-3.1-4-6-8-10mm  
形状:P2-3と同じ

インプラント起始点用にも使用

## アラインメントピン

商品コード 140-19007

**PIN IM1S**  
4,200円

※ IM1S用

商品コード 140-19001

**PIN IM1**  
4,300円

※ IM1-SP用

商品コード 140-19002

**PIN 2-2.4**  
4,300円

商品コード 140-19003

**PIN 2-3**  
4,300円

## 抜歯窩アラインメントピン

商品コード 140-19004

**PIN IM1-AL**  
4,500円

※ IM1用

商品コード 140-19005

**PIN 2-2.4-AL**  
4,500円

商品コード 140-19006

**PIN 2-3-AL**  
4,500円

# 支台歯形成 / クラウンプレップ

動作保証機種: ピエゾソーゼリータッチ・ピエゾホワイト

商品コード 140-18007

## クラウンプレップPSキット

30,000円

導入  
キット

【perio/special】



## クラウンプレップチップ 装着図

支台歯へアクセスしやすいよう  
特殊なカーブ形態をもたせ、  
先端の楕円運動で形成します。



キット構成

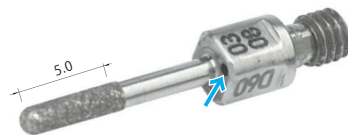
- チップホルダーDB2 先端ネジ穴にクラウンプレップチップを装着し使用
- レンチキーAB1 DB2にクラウンプレップチップを装着する際に使用
- ダイナモレンチK7 DB2専用の締結レンチ

## 各種クラウンプレップチップ

各11,000円

【perio/special】

先端：ダイヤモンドコーティング  
長さ5mm



商品コード 140-17010

## チップホルダーDB2

17,000円



商品コード 140-40005

## レンチキーAB1

8,700円



商品コード 140-40006

## ダイナモレンチK7

9,000円



商品コード 201-80004

## クラウンプレップチップスタンド

12,000円

Dental USA製

チップ収納トレイ。  
前列8穴にダイヤモンドチップ、  
後列8穴にチップホルダーDB2や  
インサートチップを収納。



直径	粗い ←		→ 細かい	
	D120	D90	D90	D60
1.2mm		商品コード 140-16040 ★ <b>TA12D90</b>	商品コード 140-16010 ★ <b>TA12D60</b>	
1.4mm	商品コード 140-16070 <b>TA14D120</b>	商品コード 140-16050 ★ <b>TA14D90</b>	商品コード 140-16020 ★ <b>TA14D60</b>	
1.6mm	商品コード 140-16080 <b>TA16D120</b>	商品コード 140-16060 <b>TA16D90</b>	商品コード 140-16030 <b>TA16D60</b>	

# キット

商品コード 140-18016

## ピエゾリフトキット

75,000円

キット構成  
PL1  
PL2  
PL3  
ホルダー



商品コード 140-18017

## サイナスリフトラテラルキット

90,000円

キット構成  
SLC  
SLO-H  
SLS  
SLE1  
SLE2  
ホルダー



商品コード 140-18018

## リセクティブペリオキット

133,000円

キット構成  
OT13  
OT14  
OP8  
OP9  
OP5A  
ホルダー



商品コード 140-18012

## エキスプランテーションキット

96,000円

キット構成  
EXP3-R  
EXP3-L  
EXP4-R  
EXP4-L  
ホルダー



商品コード 140-18003

## エキストラクションキット

72,000円

キット構成  
EX1  
EX2  
EX3  
PS2  
PS6  
ホルダー




商品コード 140-18001

## ベーシックキット

87,000円

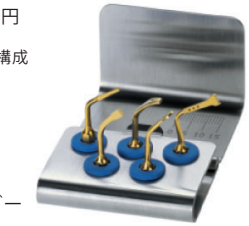キット構成  
OT2  
OT7  
OP1  
OP3  
EX1  
ホルダー



商品コード 140-18004

## オステオトミーキット

100,000円

キット構成  
OT7  
OT7S-3  
OT7S-4  
OT8R  
OT8L  
ホルダー




商品コード 140-18006

## レトロサージカルキット

87,000円

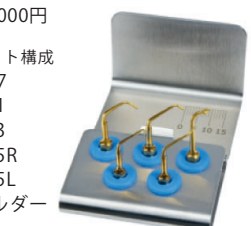キット構成  
OP7  
EN1  
EN3  
EN5R  
EN5L  
ホルダー



商品コード 140-18002

## サイナスリフトキット

80,000円

キット構成  
OT1  
OT5  
EL1  
EL2  
EL3  
ホルダー



商品コード 140-18010

## ボーンプレップキットプロフェッショナル

300,000円

キット構成  
IM1S IM4P  
IM2A P2-3  
IM2P P3-4  
IM3A PIN IM1S (3入)  
IM3P PIN 2-2.4 (3入)  
OT4 トレイ  
IM4A



販売名	ピエゾソーゼリータッチ
一般的名称	電動式骨手術器械
分類	管理医療機器
認証番号	224ALBZX00012000

販売名	ピエゾソーゼリ
一般的名称	歯科用多目的超音波治療器
分類	管理医療機器
承認番号	21600BZY00008000

販売名	アラインメントピン
一般的名称	歯科用インプラント手術器具
分類	一般医療機器
届出番号	13B1X00053K00003

販売名	デイスチャージ
一般的名称	洗浄器キット
分類	一般医療機器
届出番号	13B1X00053K00005

販売名	ピエゾアクセサリ
一般的名称	洗浄器キット
分類	一般医療機器
届出番号	13B1X00053K00006

# 各種パーツ

※ご利用の機種に合わせてご選択ください。

タッチ



ホワイト



ピエゾサージェリー



タッチ ホワイト ピエゾサージェリー

商品コード 140-30000

ディスチャージ (10イリ)

6,000円

滅菌済



タッチ ホワイト

商品コード 140-31000

ポンプチューブ/タッチ (8イリ)

6,600円



ピエゾサージェリー

商品コード 140-30001

ポンプチューブ (8イリ)

5,000円



タッチ ホワイト

商品コード 140-21002

LEDハンドピース/タッチ

240,000円

ライト付き



タッチ ホワイト

商品コード 140-22002

ハンドピース

210,000円

ライトなし



タッチ ホワイト

商品コード 140-21004

HPプラスチックLEDコーン

20,000円

ハンドピース先端ライト部交換用  
※ライトなしハンドピースには使用できません。



商品コード 140-41002

ハンドピーストレイ

19,000円

253×112×46mm



タッチ ホワイト

商品コード 140-41001

プロテクションフィルム/  
タッチ (10イリ)

8,800円

滅菌済



タッチ ホワイト ピエゾサージェリー

商品コード 140-40010

ダイナモレンチ K8

10,000円



商品コード 300-13093

インストルメント  
オイル

2,200円

ダイナモレンチの注油に



商品コード 140-40017

MEC酵素洗浄液  
(500ml)

3,500円



タッチ ホワイト

商品コード 140-31001

ボーングラフトキット

8,500円

骨採取を行う際の  
注水流量調節



ピエゾサージェリー

商品コード 140-30003

チューブコネクター

2,000円



・チューブコネクター  
・ボーングラフトポンプチューブ (8入)

商品コード 140-40002

ピエゾチップホルダー

6,200円



商品コード 201-80004

クラウンプレップ  
チップスタンド

12,000円

前列8穴: ダイヤモンドチップ用  
後列8穴: チップホルダー-DB2  
インサートチップ用



商品コード 140-40013

インサートボックス

39,600円

インサートチップ  
15本収納



医療用ワゴン

商品コード 610-00003

モービルカート3段 電源あり

価格はお問合せください。

商品コード 610-00002

モービルカート3段 電源無

価格はお問合せください。

商品コード 610-00001

モービルカート2段 電源無

価格はお問合せください。



モービルカート  
3段タイプ  
電源の有無を  
選べます。



モービルカート  
2段タイプ

機器設置イメージ  
※機器は付属しません。

## 注文書

TEL	FAX	注文書 記入日	ご使用 予定日
診療所名	ご芳名		
〒 ご住所	都 道 府 県	市 区 郡	
商品コード	商品名	注文数	
商品コード	商品名	注文数	
商品コード	商品名	注文数	

- ご注文の商品は宅配便にて配送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降のご注文につきましては翌日発送となります。在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。配送料は1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合、ご負担いただけます。時間指定便・航空便等をご利用の際は別途料金が必要となります。あらかじめご了承ください。
- 商品の返品は、ご注文品と異なる場合、または不良品に限りお受けいたします。弊社にご連絡の上、製品到着後14日以内にご返送ください。(未開封、パッケージ破損の無い物に限ります。)
- 商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格・消費税別となります。
- ご記載いただいた個人情報は、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

## 注意

メクトロン社のピエゾサージェリー®には、必ず純正インサートチップをご使用ください。非純正品を使用するとハンドピース先端の取付部が変形し、インサートチップが正しく固定できなくなり、破折、故障の原因となります。



メクトロン社製の純正インサートチップを使用している正常な取付部。



非純正品のインサートチップを使用し変形・摩耗した取付部。インサートチップの固定ができなくなり危険です。

ご注文は 24時間受付 **FAX: 03-5850-8505**

(株式会社インプラテックス 東京本社)

製造販売元/発売元



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp



メール配信登録で  
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は  
QRコードから登録フォーム  
にお入りください。➡



インプラテックス

検索

お取扱店

製造元

mectron

(イタリア)

medical technology

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

202507