

剥離子 オーダーシステム

● 手法に合わせて、セレクト自在

「ハンドル」と「先端部」を自由に組み合わせて、オリジナル剥離子がオーダーできます。
スムーズな治療と、インスツルメントに要するコストやスペースの削減にも貢献します。

1 ハンドル×3種類、先端部×31種類の
豊富なラインナップ

2 手法に合わせて手組み合わせることで
スムーズな治療が可能

3 インスツルメントの本数を減らせるので、
コスト削減に貢献

パターン1 保坂 均先生 ご考案 日本歯周病学会 指導医・専門医

- 頰部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。
上下・左右を組合せた2本であらゆる部位に対応でき、歯周外科に適しています。



HE1 + 丸柄 + HE2



HE3 + 丸柄 + HE4

[HE1]



● 口蓋側を剥離します。

[HE2]



● 唇側を剥離します。

剥離子オーダーシステム HE1+HE2 / HE3+HE4
臨床動画




URL : <https://youtu.be/QhMfo2BnVpw>


上記 QR コードをスマートフォンや
タブレット端末のバーコードリー
ダーで読み取ってください。

パターン2 山本松男先生 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- 極小サイズのため、狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを最小限に抑えて剥離できます。
- 鋭匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有用です。

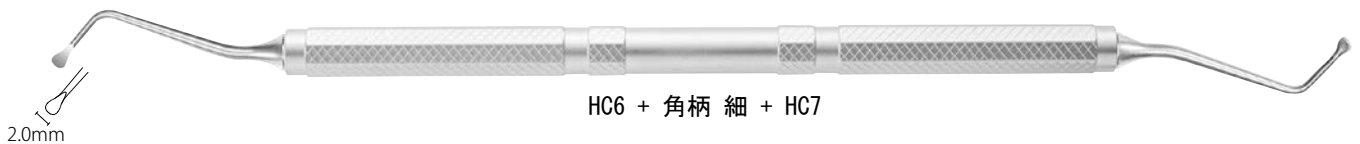

HC6 + 角柄 細 + HC7

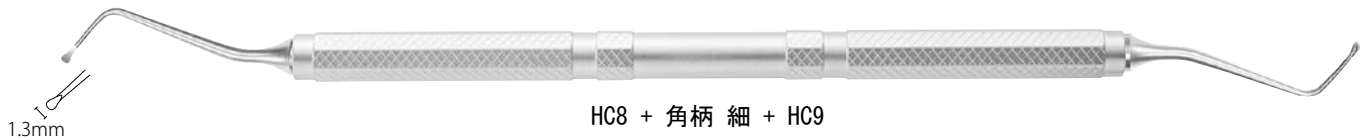

HC8 + 角柄 細 + HC9

[HC6]



● 歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズ先端部が有効。
歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、
狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。

[HC8]



● 極小スプーン状の先端部は鋭匙としても有用。
クレーター状骨欠損部等でも骨を削除すること
なく、不良肉芽のみを掻き出すことができます。

ハンドル



角柄 細
商品コード 300-15003
標準価格 9,700円

※長さ/110mm
※径/φ6.5mm



丸柄
商品コード 300-5008
標準価格 10,800円

※長さ/110mm
※径/φ9.5mm



丸柄 Short
商品コード 300-5009
標準価格 10,300円

※長さ/80mm
※径/φ9.5mm

ご注文方法



HC3

丸柄

HB2


[組合わせ例]

ハンドル: 丸柄
先端部: HC3、HB2 をご指定の場合

コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2」

医療機器届出番号 11B1X1000642D033
一般名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

[粘膜 (広範囲)]

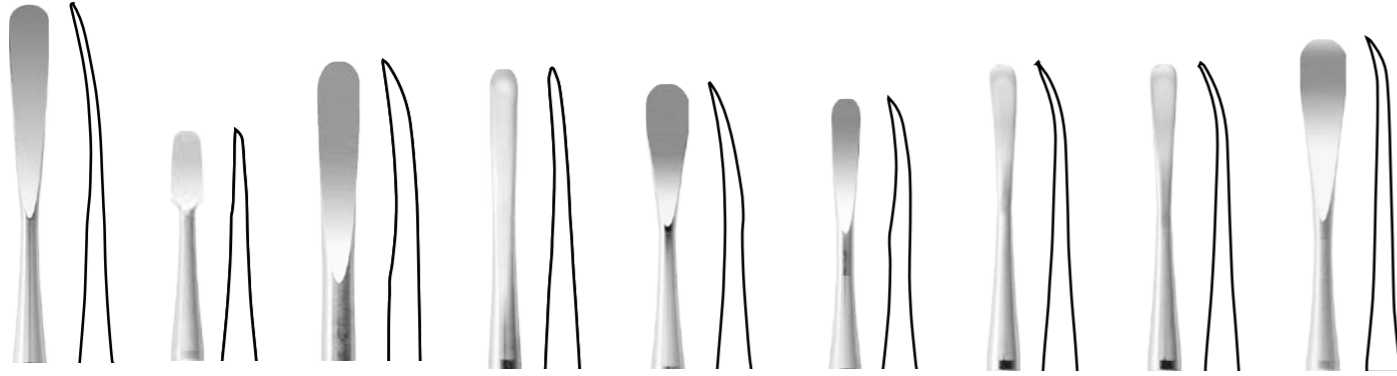


HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 HA7 HA8 HA9

刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付

パターン3

[粘膜 (狭範囲)]

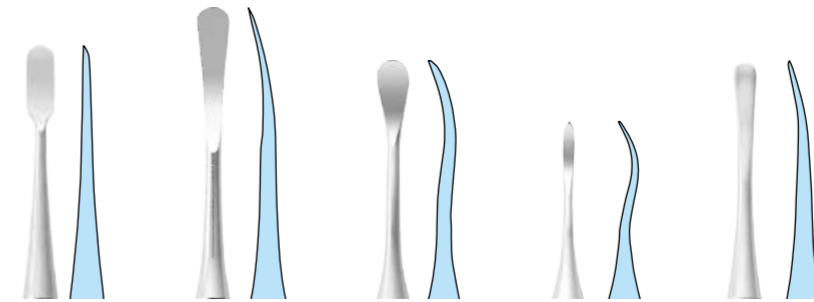

HB1 HB2 HB3 HB4 HB5

刃付 刃付 刃付 刃付 刃付


パターン5

パターン6

パターン3

パターン3

[歯間乳頭]

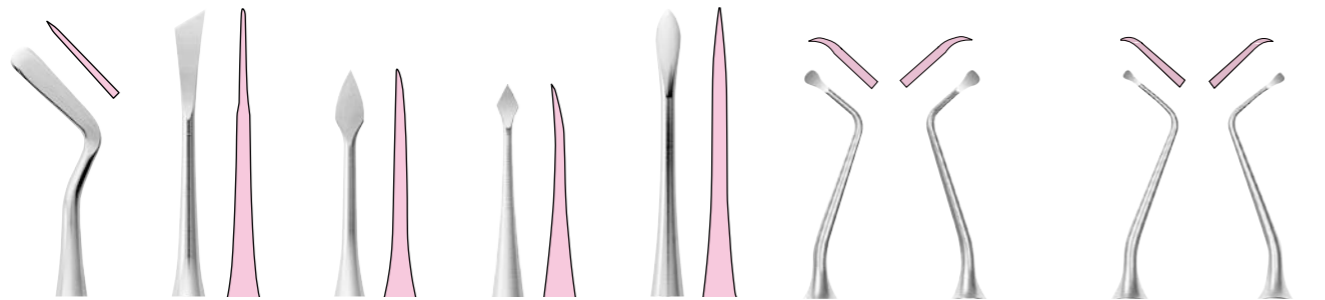

HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 HC9

刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付

パターン5

パターン3
パターン6


パターン2

パターン2

パターン2

パターン2

[歯肉排除]

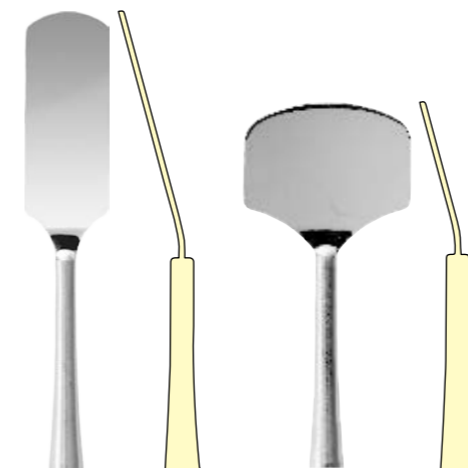


HD1 HD2

鏡面 鏡面

パターン4

パターン4

[骨膜]

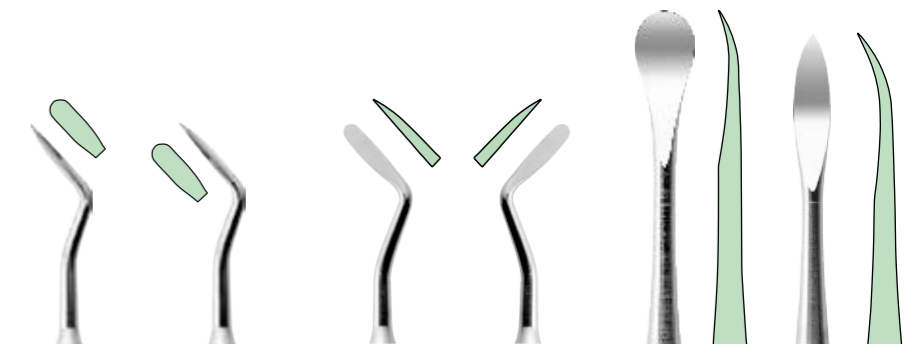

HE1 HE2 HE3 HE4 HE5 HE6

刃付 刃付 刃付 刃付 刃付 刃付

※背面が平ら

※内面が平ら

パターン1

パターン1

パターン1

パターン1

パターン3

上田秀朗先生 上田塾主宰



HB4 + 丸柄 + HC4




HA2 + 丸柄 + HB5

パターン4

青井良太先生 ご考案 SBC (Surgical Basic Course) 主幹

- 歯肉排除用の組み合わせ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。
- 術部確認のミラー機能も併用できます。

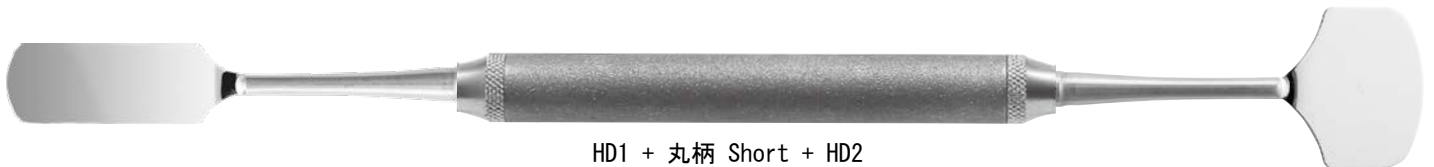

HD1 + 丸柄 Short + HD2

[HD2]



- 広範囲の歯肉を排除できます。

パターン5


石井 宏先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師



HB2 + 丸柄 + HC2

パターン6

多保 学先生 たば歯科医院 理事長 日本歯科大学附属病院 臨床准教授

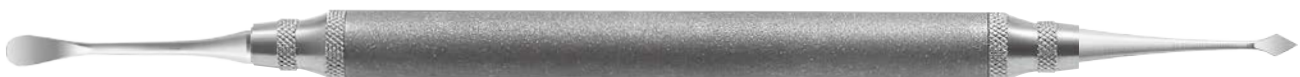

HB3 + 丸柄 + HC4

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
 ※掲載製品の標準価格は、2021年1月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B 1 X 1 000 6

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売



株式会社 インプラテックス

いつも、となりに

本社：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
 TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505
<http://www.itx.co.jp>