

スクリューリムーバー

Screw Remover

- ☑ 破折したアバットメントスクリューの除去に
- ☑ オートクレーブ対応の高耐食ステンレス製
- ☑ 安全な手指操作


スクリューリムーバー全4種

- ・M1.6用 Lサイズ、Sサイズ
- ・M2.0用 Lサイズ、Sサイズ

※画像はM1.6用 Lサイズです。



使用方法

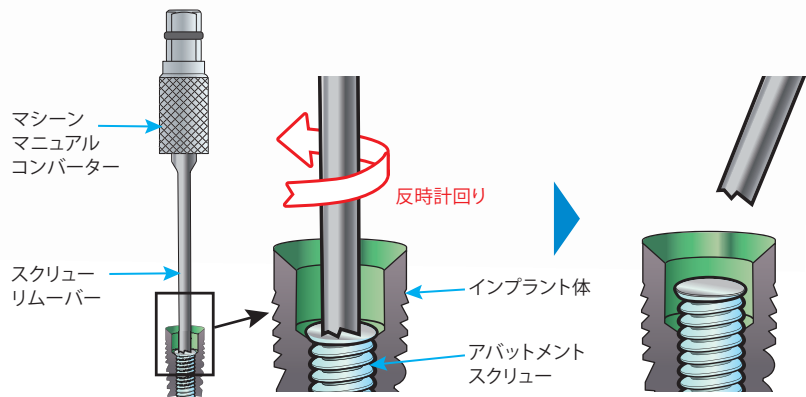

本体の先端の刃部を、破折したアバットメントスクリュー断面に押し当て、手指にて反時計回りに回転させ、破折したアバットメントスクリューを除去してください。

商品コード 310-25101

品名 スクリューリムーバーM1.6用 L 本体
仕様 全長：32mm、先端外径：Ø1.1mm
標準価格 15,000 円



商品コード 310-25103

品名 スクリューリムーバーM2.0用 L 本体
仕様 全長：32mm、先端外径：Ø1.4mm
標準価格 15,000 円

商品コード 310-25102

品名 スクリューリムーバーM1.6用 S 本体
仕様 全長：24mm、先端外径：Ø1.1mm
標準価格 12,000 円

商品コード 310-25104

品名 スクリューリムーバーM2.0用 S 本体
仕様 全長：24mm、先端外径：Ø1.4mm
標準価格 12,000 円

商品コード 020-27004

品名 マシーンマニュアルコンバーター
標準価格 9,000 円



材質：ステンレス(スクリューリムーバー・ドライバー)
滅菌方法：オートクレーブ 121℃、20分

※スクリューリムーバーはマシーンマニュアルコンバーターに装着してご使用ください。


インプラント体内部に残ってしまった、
破損したアバットメントスクリューの除去に

スクリューリムーバー

Screw Remover



スクリューリムーバー-M1.6用 L 本体

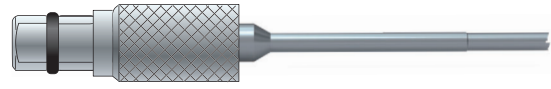

マシンマニュアルコンバーター装着イメージ

※スクリューリムーバーはマシンマニュアルコンバーターに装着してご使用ください。

サイズ表

(単位mm)

形式	外径 ØD1 / D2	部分長L1 / 全長L2	
M1.6用L	1.1 / 1.2	17 / 32	
M1.6用S	1.1 / 1.2	9 / 24	
M2.0用L	1.4 / 1.5	17 / 32	
M2.0用S	1.4 / 1.5	9 / 24	

注文書

注文書
記入日

ご使用
予定日

電話番号	FAX 番号					
診療所名	ご芳名					
〒	都道 府県	市区 郡				
Eメールアドレス						
商品コード	310-25101	商品名	スクリューリムーバー-M1.6用 L 本体	標準価格	15,000円	注文数
商品コード	310-25102	商品名	スクリューリムーバー-M1.6用 S 本体	標準価格	12,000円	注文数
商品コード	310-25103	商品名	スクリューリムーバー-M2.0用 L 本体	標準価格	15,000円	注文数
商品コード	310-25104	商品名	スクリューリムーバー-M2.0用 S 本体	標準価格	12,000円	注文数
商品コード	020-27004	商品名	マシンマニュアルコンバーター	標準価格	9,000円	注文数
備考						

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

販売元



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

インプラテックス



製造販売元

株式会社デンテック

〒174 0053 東京都板橋区清水町 53 番 5 号
TEL : 03-3964-2011 FAX : 03-3962-5624

株式会社インプラテックス

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。 2022.09